


Consejos y trucos: Micrófono PartnerMic

El micrófono PartnerMic de Phonak capta la voz del hablante y transmite el sonido directamente a los audífonos de su hijo para mejorar la comprensión del habla a distancia y en lugares con mucho ruido.

EMPAREJAMIENTO

Se necesita emparejar los audífonos con el micrófono PartnerMic antes de usar.

1. Asegure que los audífonos están encendidos.
2. Encienda el micrófono PartnerMic y manténgalo a menos de 10 centímetros de distancia de los audífonos.
3. Emparejamiento está completado cuando la luz indicadora se vuelva verde. También escuchará un pitido de confirmación.
4. Solo es necesario emparejar los audífonos una vez. Permanecerán emparejados incluso después de apagarlos y encenderlos.
5. Una vez emparejados, el micrófono PartnerMic funciona automáticamente al encenderlo.

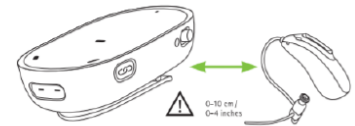

USO

Utilice el micrófono PartnerMic para enviar la voz del hablante directamente a los audífonos. Se alcanza hasta 25 metros de distancia y se recomienda usar en lugares con mucho ruido (en el coche, el parque, durante paseos, etc.)

1. El orador debe llevar el micrófono aproximadamente 20 centímetros por debajo de la boca. Se puede sujetar a la ropa o al cordón.
2. Asegúrese de que el micrófono no esté cubierto por la ropa ni por joyas y que no choque con ningún objeto mientras esté encendido.

During operation		
Solid green 3 sec		Switching on
Blinking red		Low battery (~30min left)
Blinking blue		Pairing mode
Solid red 5 sec		Pairing failed
Staying solid red		Device error
During charging		
Blinking green		Charging
Staying solid green		Charging complete

